

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de **Equipamiento Hospitalario**



CMS508

CMS516



Diseñado y fabricado en Argentina
Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Central de Monitoreo

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Características Principales

El Sistema de Monitoreo Central CardioTecnica –CMS5XX está diseñado para monitorear y presentar en tiempo real los datos tomados por los Monitores Multiparamétricos instalados en la UTI, UCO, Internación de pacientes adultos, pediátricos y neonatales u otros servicios.

Su pantalla de alta resolución permite tener una clara visión de diferentes parámetros y formas de ondas de todos los monitores conectados en la red así como la revisión de alarmas, señales y los eventos de un paciente específico.



Operación intuitiva y amigable del menu.
Menú, mensaje e indicaciones en tres idiomas seleccionables.
Permite cambiar la forma de visualización en Modo Formas de Ondas o Modo Numérico.
Visualización rápida de las ultimas 10 mediciones de NIBP.
Posee una alta capacidad de almacenamiento de datos en forma gráfica, de Tendencias y tablas con Resúmenes de Valores.
Reporte en forma de tabla de los eventos ocurridos, con posibilidad de tener presente las formas de ondas en el momento del mismo.
Velocidad de barridos individuales para el sistema circulatorio y el sistema respiratorio.
Función congelar un paciente determinado.
Posibilidad de configurar camas de alta vigilancia con repetición completa del monitor asociado.
Impresión de listado de eventos, tabla de reportes, formas de ondas, datos del paciente y listados de pacientes.



Presentación de Fecha y Hora en pantalla.
Posibilidad de Cargar Nombre de la Institución o Usuario.
Posibilidad de personalizar las camas colocando los datos del paciente.
Posibilidad de conectar a impresora láser.
Manejo con teclado y mouse.
Ajuste automático al tamaño de pantalla conectado al sistema.
Posibilidad de conectar un segundo monitor para revisar las señales o tendencias de un paciente sin dejar de monitorear el resto de las camas.



Alarma programable de eventos en todos sus parámetros con indicación visual y auditiva.
Alarmas fisiológicas, técnicas y generales.
Silencio y suspensión de alarmas




Fuente de alimentación 100-240 VAC -50/60 Hz.



Producto autorizado por el
Ministerio de Salud de la Nación.
A.N.M.A.T. PM1230-7.

Pantallas de Uso

Equipo con 1 LCD

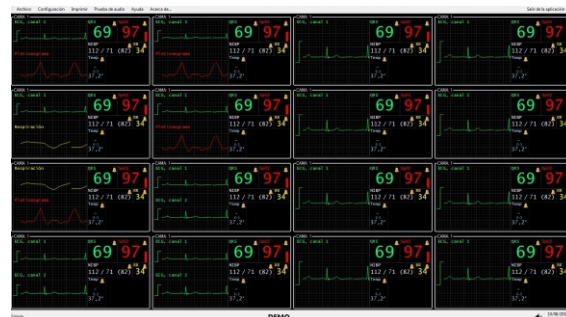


Pantalla 8 Camas-2 de Alta Vigilancia

Pantalla 16 Camas


Equipos con 2 LCD



Pantalla 14 Camas-2 de Alta Vigilancia

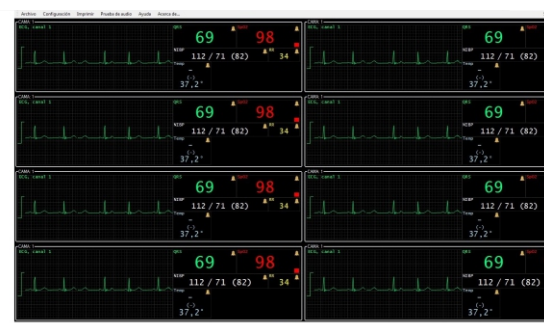


Pantalla 16 Camas-2 de Alta Vigilancia

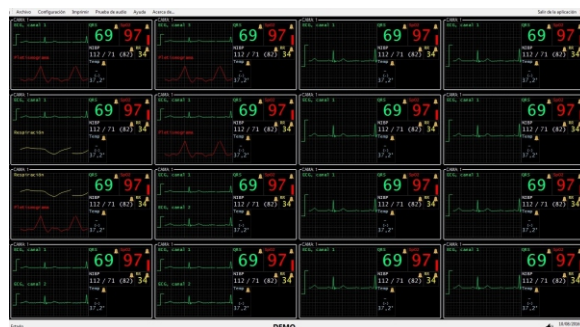


Pantalla 16 Camas-Pantalla de Reporte

Pantallas Técnicas

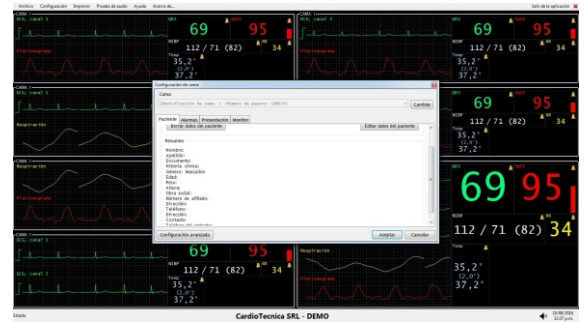



Pantalla Configuración Institución

Pantalla Configuración de Cama

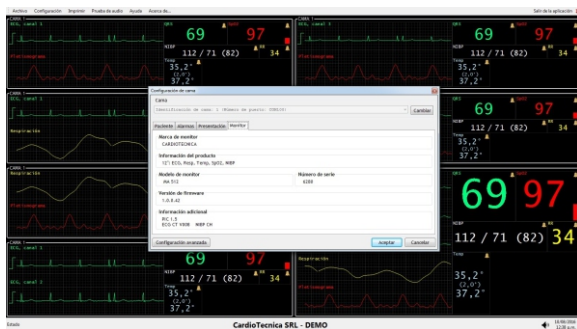

Pantalla Configuración de Cama

Pantalla Configuración General

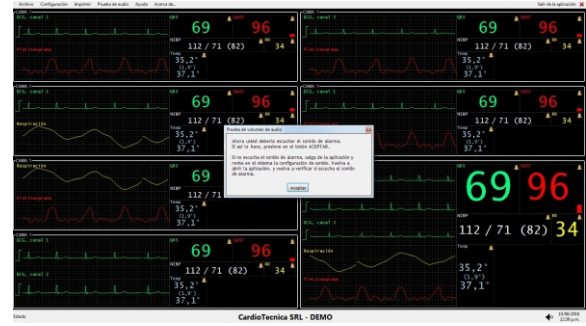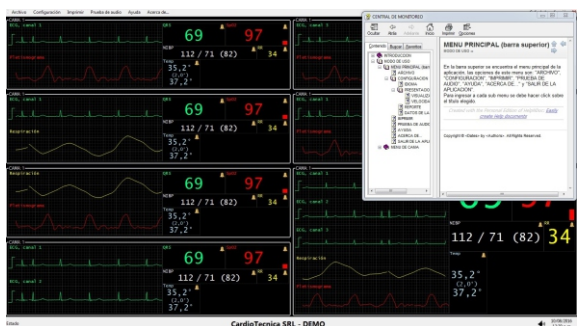

Pantalla de Ayuda

Pantalla Prueba de Audio

Conectividad MA5XX

Permite conectar hasta 16 camas según el modelo de la Central.

Conexión mediante puerto RS422 con los Monitores Multiparamétricos CardioTécnica línea MA507 y MA512.



MA507



MA512



MA507 Oxicapnógrafo



DISPOSITIVOS
MÉDICOS

RI 13485-016



CardioTécnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar

La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016