

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de Equipamiento Hospitalario



ECGProVet



Diseñado y fabricado en Argentina
Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Electrocardiógrafos

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Características Principales



Adquisición de 6 / 7 derivaciones simultáneas.
Preamplificador aislado con entrada flotante.
Gabinete inyectado en plástico de gran rigidez.
Cable paciente con puntas desmontables.
Mediciones asistidas sobre la derivación configurada.
Sensibilidad: 1/2, 1, 2 y 4.
Velocidad de Impresión: 25, 50 y 100mm/seg.



Filtros programables según necesidad.
Filtro de línea: 50 / 60 Hz.
Filtro de línea basal: 0.05 / 0.1 / 0.5 Hz.
Filtro tremor muscular: 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 / 100Hz.



Completa base de datos de los pacientes y profesionales.
Memoria de estudios para posterior impresión.




Conexión a PC / Notebook por Puerto USB.



Alimentación directa desde el puerto USB.

Conectividad ECGProVet

La información de los **6 / 7 canales de ECG** es transmitida en forma simultanea a la **PC**, a través del puerto **USB**.
Utilizando un software específico, es posible editar el estudio, realizar mediciones y seleccionar el tramo de señales para enviar por **mail** o **imprimir en hoja A4** en cualquier impresora.

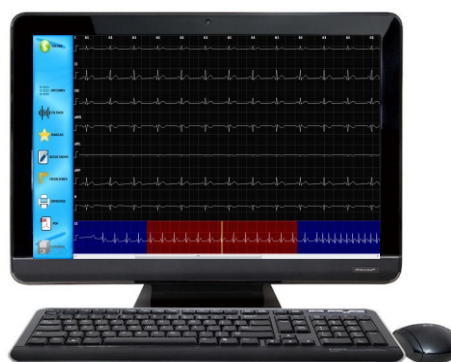

Características del software

Software con interface al usuario simple e intuitiva.

Completa base de datos que incluye información del paciente, propietarios y estudios históricos.

Medición continua de la frecuencia cardiaca, presentandola en pantalla.

Modo ECG rapido, este modo no utiliza la base de datos.


Presentación en pantalla del estudio en diferentes formatos configurables.

Monitoreo continuo con la posibilidad de marcar eventos para su posterior revisión e impresión.

Mediciones asistidas sobre la derivación configurada, con corrector de la posición del cursor.



Generación de informes en formato PDF para facilitar el envío por correo electrónico.

Impresión del estudio en diferentes formatos según configuración seleccionada.

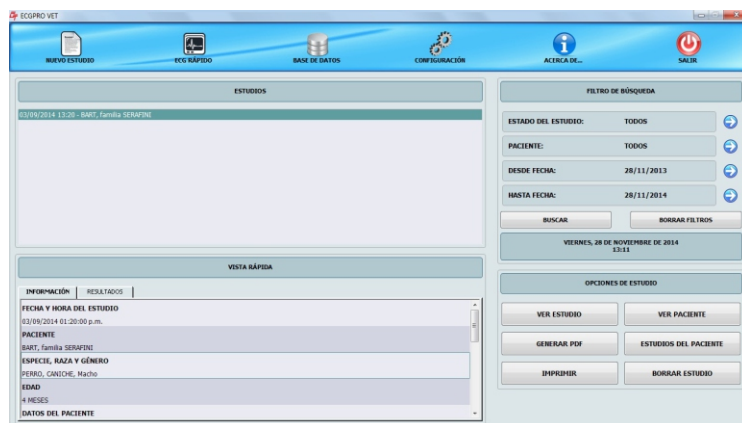

Pantalla inicial


Pantalla de Uso

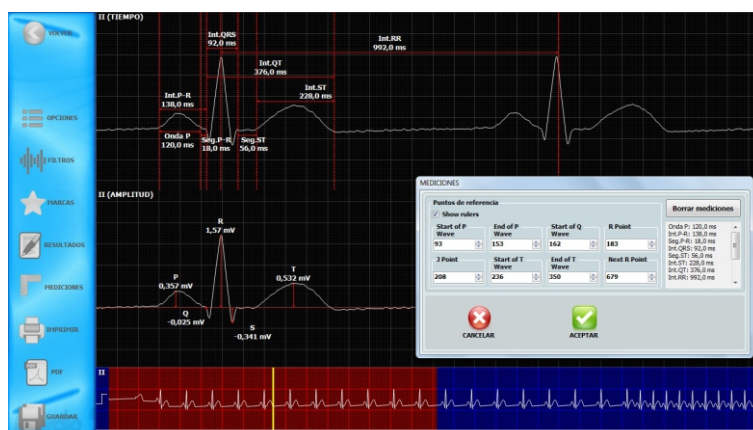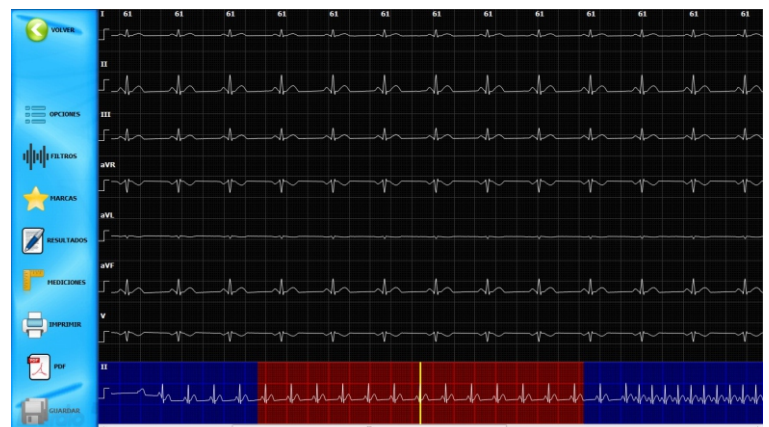



Mediciones

Informes

Reducido / Informe ECG rapido

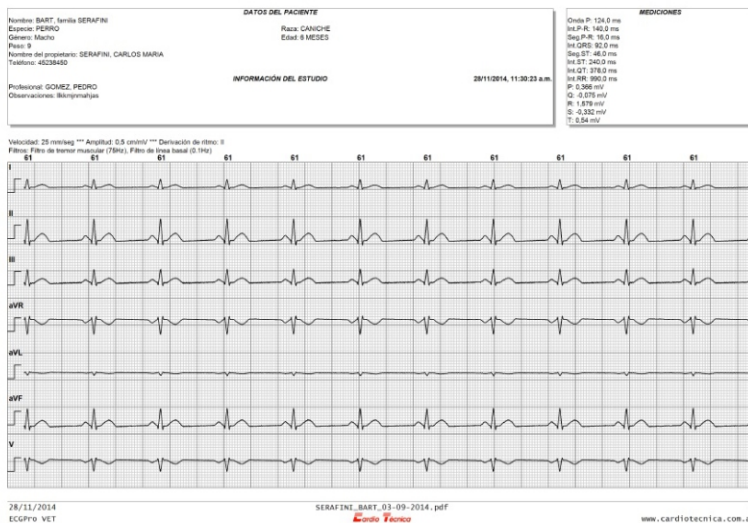

Informe completo

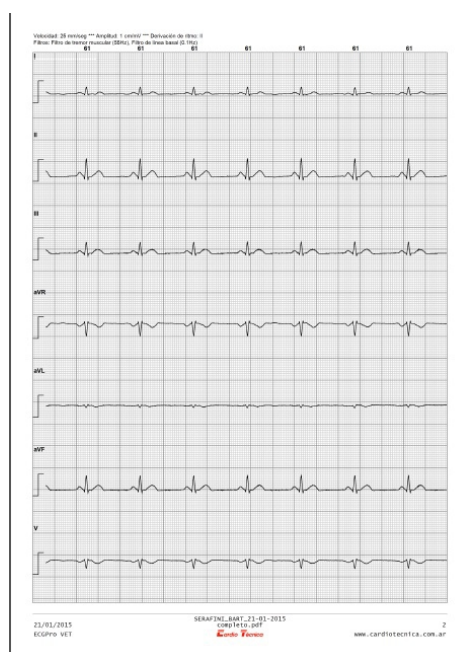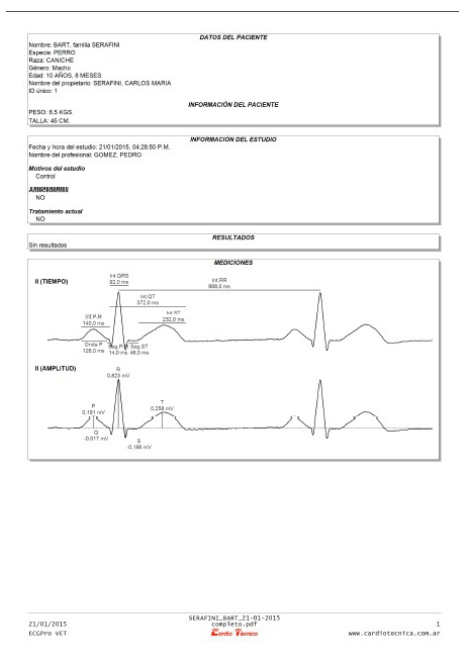

DISPOSITIVOS MÉDICOS

RI 13485-016



Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar

La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016