

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de Equipamiento Hospitalario



Mediana **A15**



Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Desfibrilador Externo Automático

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Mediana A15

Desfibrilador Externo Automático

Desfibrilador externo automático DEA modelo A15 de la firma Mediana, que funciona con electrodos compatibles para adulto y pediátrico, cambiando el modo de paciente con un interruptor. El mismo dispone de un sistema de seguridad que después de analizar en ECG, el botón de descarga (shock) parpadea e indica claramente que se debe proceder a la desfibrilación.



Características Principales

DEA A15



Guía a los usuarios mediante mensajes de voz, incluido soporte para RCP.

Indica el estado del equipo mediante luces LED.

Electrodo compatible para uso en pacientes adultos y niños, mediante un interruptor se puede cambiar el modo de paciente.

Auto Test diario, semanal, mensual y al ponerlo en marcha. Estos tests totalmente automáticos incluyen el control de la batería y el motor de descarga, así como el test de integridad del software.

Para garantizar la seguridad del usuario y del paciente, después de analizar el ECG el botón de descarga (shock) parpadea e indica claramente que se debe proceder a la desfibrilación.

Mediante tarjeta SD permite comprobar los ECG en un ordenador y también actualizar el equipo cuando cambian las normas de ERC.

Desfibrilación: Onda bifásica SMARTSHOT. Energía 45-200 J. Carga en 13 seg.

ECG: Derivación II – VF/VT. Tiempo de análisis de 8 a 12 seg.

Indicaciones y Guía: Iconos, LCD, Vox, Texto, Indicación RCP

Memoria y Comm.: Tarjeta SD. IrDA Red (opcional)

Batería: Tipo LiMnO2. Almacenamiento 5 años. Mínimo 200 descargas. Monitorización 10 horas.

Regulaciones: AAMI DF80, IEC 60601-1-2, IEC 60601.1-4, IEC 60601.1-2-4 2005
Guía AAMI ERC 2010

Auto Test: Cada 24 horas, semanal, mensual y al encender el equipo. Resultado del test y status del LCD.

Electrodos de desfibrilación de un solo uso adulto / pediátrico. Caducidad 2 años.



Dimensiones 40cm x 15cm x 30cm



Peso 2 Kgs aproximado

Modo de uso:

Operación fácil y rápida:



Software de revisión de eventos DEA:

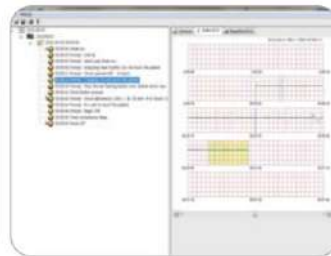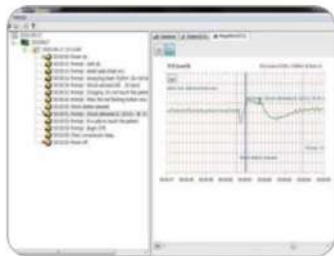

Accesorios

Incluye:

- 1 Par de electrodos adulto/pediátrico
- 1 Funda protectora
- 1 Manual de usuario



Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinas 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar
info@cardiotecnica.com.ar