

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de **Equipamiento Hospitalario**



Diseñado y fabricado en Argentina
Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Electrocardiógrafo RG706

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Electrocardiógrafo RG706

El Electrocardiógrafo CardioTécnica RG706 es un equipo portátil de 12 derivaciones de adquisición de ECG y hasta 6 canales de registro, posee múltiples formatos de impresión con la posibilidad de seleccionar el tamaño de papel entre 80mm y 50mm de ancho. La interfaz de usuario es muy amigable desde su pantalla táctil de 5" en la cual se presentan las 12 derivaciones de ECG simultáneamente.

En su puerto USB puede conectarse al Software de gestión con base en la PC o descargar los estudios guardados en la memoria interna con la posibilidad de configurar el formato de descarga entre PDF, JPG, PNG entre otros.

Con un diseño robusto y compacto es ideal para uso domiciliario, urgencias y centros de salud donde se necesite realizar exámenes de ECG, con medición y diagnóstico automático en sus diferentes Modos de trabajo.

El equipo tiene doble alimentación, se utiliza conectado a la red eléctrica y con baterías recargables de Litio incluidas en el mismo.

Características Principales



Inscripción por Matriz térmica de alta definición - 8 dot/mm

Comandos digitales por Teclado de membrana

Pantalla TFT color TouchScreen de 5" con ajuste de Brillo

Datos en Pantalla: Información del paciente, 12 derivaciones de ECG, fecha y hora, BPM, datos de configuración además de teclas de acceso directo

Comandos digitales por Teclado de membrana

Preamplificador aislado con entrada flotante

Protección contra descargas de desfibriladores

Incluye Detector de Marcapasos

Soporta Papel Termosensible en Rollo de 80mm y 50mm.

Sensibilidad: 5, 10, 20 y auto ganancia

Velocidad de Impresión: 12.5, 25 y 50 mm/seg



Modos de Registro: Manual, Automático y Ritmo

Realiza un estudio pulsando un botón en Modo Automático.

Tiempo de Impresión en Modo Automático: 2,5s / 5s / 7s / 10s

Formatos de impresión configurable por el usuario.

Papel 50mm: 1X12+1 / 2X6.

Papel 80mm: 3X4 / 3X4+1 / 6X2

Filtro de línea: 50Hz / 60 Hz / Apagado

Filtro de línea basal (DFT) : 0.01, 0.05, 0.3 y 0.6 Hz y apagado

Filtro de EMG de 25, 35, 45, 75, 100, 150 Hz y apagado

Modo de Adquisición: Pre Muestreo / Tiempo Real.

Adquisición de ECG instantánea de 10 segundos



Función reimpresión de estudios realizados

Memoria de estudios para posterior impresión o descarga

Salida puerto USB para descarga de estudios en memoria

Formatos posibles de descarga: PDF, JPG, PNG, XLM, ZQECG.

Puerto USB para transmisión de 12 derivaciones al software de gestión de ECG



Realiza mediciones automáticas de tiempos y amplitudes

Imprime un diagnostico presuntivo

Impresión de datos editados del Paciente

Impresión de Fecha y Hora del estudio

Impresión de velocidad, amplitud y filtros programados

Impresión de datos del profesional o Institución



Baterías recargables de li-ion

Cargador de baterías incorporado

Gran capacidad de realización de estudios con su batería interna

Alimentación de red 100 a 240 VAC 50/60 Hz



Dimensiones 264mm x 180mm x 64mm

Peso 1,050 Kgs aproximado sin accesorios

Peso 1,890 kgs aproximado con accesorios




Producto autorizado por el
Ministerio de Salud de la Nación
A.N.M.A.T. PM 1230-16

Conectividad RG706

Descarga de los estudios a un pen drive mediante puerto USB.

Generación automática de los estudios en formato PDF, PNG, JPG o XML, a elección del usuario.

Transmisión en tiempo real de 12 derivaciones de ECG a la PC, mediante software el "Estación de trabajo"

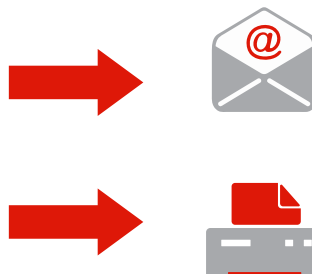

Accesorios

Incluye:

- 1 Cable Paciente - 10 Terminales
- 1 Cable para alimentación de Red
- 1 Rollo de papel termosensible
- 4 Pinzas Porta electrodos de miembro
- 6 Electrodo precordiales de succión
- 1 Eje portarrollo de papel 80mm
- 1 eje portarrollo de papel 50mm
- 1 Guía rápida de uso



Opcional:

- Bolso porta equipo
- Software "Estación de trabajo"



La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016

Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
Whatsapp: +54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar